


Lavadora ultrasónica UX60 UX75 UX100

Lavadora ultrasónica para
lavado de instrumental quirúrgico



Dimensiones

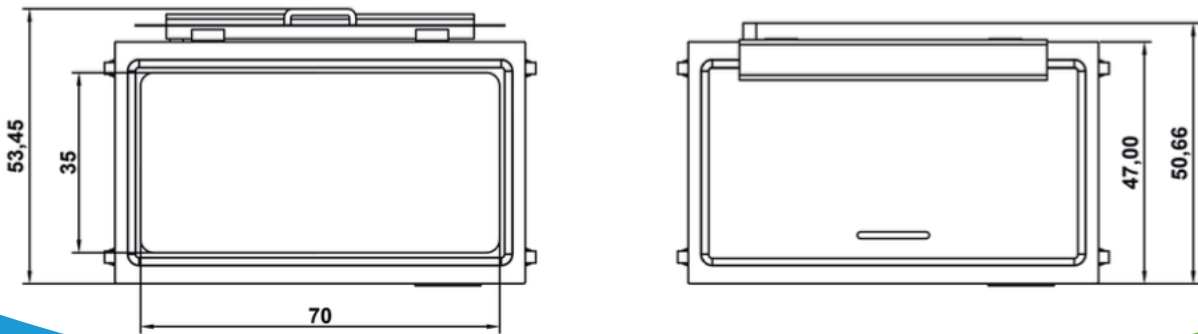

Con respecto a las lavadoras de instrumental quirúrgico tenemos la Lavadora Ultrasónica para desincrustación de material orgánico en instrumental de CEYE, con control de temperatura y tiempo. Frecuencia de 40kHz. Tina Fabricada 100% Acero inoxidable AISI 304.

Equipo de lavado y desincrustación de material por medio de ultra frecuencia, en específico 40kHz, aunado a un sistema de calentamiento del medio, aumentamos la eficiencia de la solución en la que se sumerge el instrumental. Cuenta con un programa de control de tiempo y temperatura, donde por medio del control principal programamos y nos des entendemos del ciclo hasta su fin.

La tina de lavado, se encuentra fabricada 100% en Acero Inoxidable AISI 304, así como la rejilla, cuentan con un sistema de llenado/ drenaje que puede estar conectado para realizarse de manera manual o automática.

Compatible
con canastillas



Nota: EBP se reserva la modificación de sus modelos para la mejora continua.

Las lavadoras ultrasónicas EBP serie UX ayudan a incrementar la eficiencia en el Departamento de Procesamiento Estéril (CeyE) a través de un poderoso poder ultrasónico de limpieza. Reprocesan una gran variedad de instrumental quirúrgico. * Con flexibilidad de ajustar tiempo y temperatura de proceso

* Capaces de procesar en contenedores EBP de instrumental de hasta 1 DIN. La cavitación, los jabones, la temperatura y el tiempo remueven materia orgánica que no pudo el lavado mecánico.

Interior

DIMENSIONES INTERNAS

60 Litros
70x35x30cm

75 Litros
70x35x38cm

100 Litros
840x575x350cm





Equipos
Biomédicos
Profesionales

www.equipos-biomedicos.com.mx



Mar Caspio # 25
Col. Popotla C.P 11400
CDMX



(01 55) 53963280
(01 55) 53963284
(01 55) 53415887



ventas@equipos-biomedicos.com.mx
contacto@equipos-biomedicos.com.mx